




Mehr als
Behandlungsflexibilität.
Mehr Effizienz
in Ihrem Labor.

Mehr als hohe Flexibilität.

Der effizienteste Weg zu Ihrer Restauration.

Straumann® Variobase® bietet Ihnen eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten für Einzelzahn- und Brückenversorgungen. Ihr Labor kann effizienter arbeiten, da Sie flexibel Ihren bevorzugten laborinternen Arbeitsablauf einsetzen können, um Implantatversorgungen anzufertigen. Dabei nutzen Sie zusätzlich die Vorteile der Straumann® Original-Implantatverbindung.

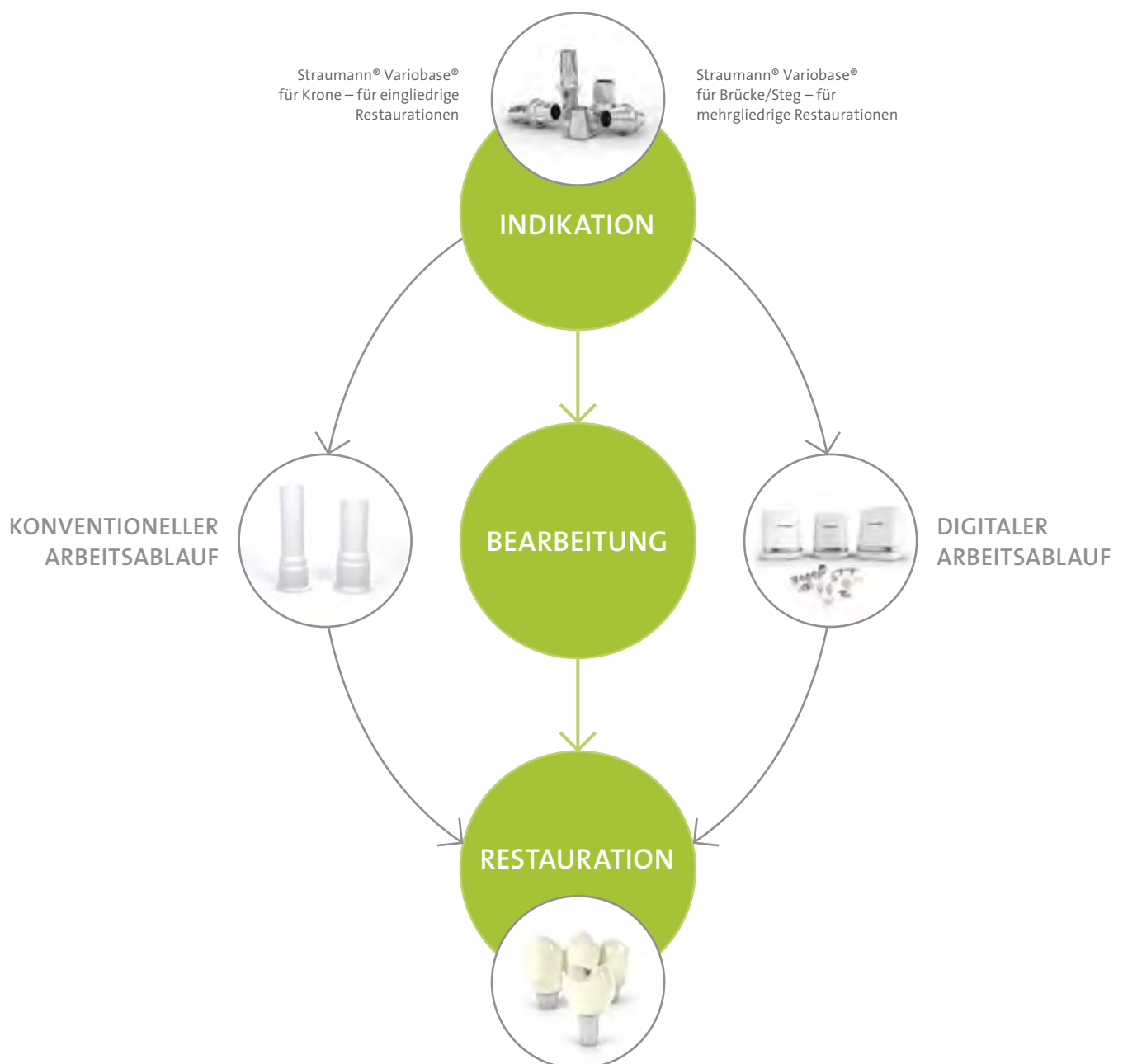

Mehr als ein Sekundärteil.

Maximale Gestaltungsfreiheit.

Straumann® Variobase® kombiniert erweiterte Restaurationsmöglichkeiten mit maximaler Gestaltungsfreiheit.



STRAUMANN® VARIOBASE® FÜR KRONE

Straumann® Variobase® für Krone für eingliedrige Restaurationen ist jetzt in zwei Sekundärteilhöhen erhältlich.


Zuverlässige Retention der Kappe auf dem Sekundärteil

Dank des patentierten* Rastmechanismus mit vier Nocken zur Positionssicherung ermöglicht Variobase® für Krone einen präzisen Sitz sowie Rotationssicherung der Kappe bzw. Krone. So ist es möglich, die rotatorischen Passgenauigkeiten der Kappe im Vergleich zu anderen Designs mit nur einer Nocke zu erhöhen.



Neu erhältlich mit modifizierbarer Bauhöhe

Zur optimalen Anpassung an die individuelle Patientensituation können Sie die Bauhöhe von 5,5 mm auf 3,5 mm ändern**.

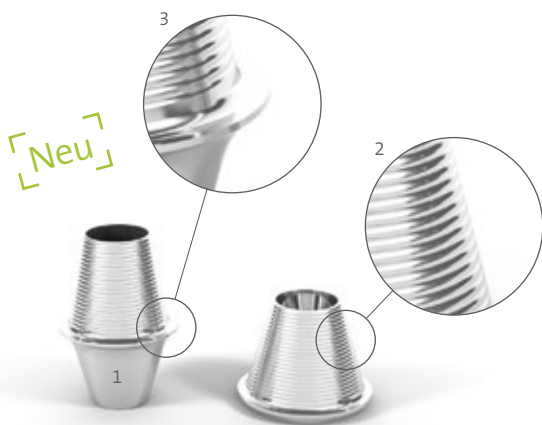

STRAUMANN® VARIOBASE® FÜR BRÜCKE/STEG

Nutzen Sie die hervorragende Leistungsfähigkeit der Straumann Produkte jetzt auch bei mehrgliedrigen Restaurationen mit geraden und divergierenden* Straumann Implantaten.

- 1 Nicht rotationsgesicherte konische Form, entwickelt für kostengünstige und individuelle Brücken- und Stegversorgungen
- 2 Spiralgewinde für eine zuverlässige Retention der prothetischen Versorgung
- 3 Referenzseite für langfristige Stabilität und passiven Sitz, die speziell für implantatgestützte Brücken oder Deckprothesen benötigt werden

WEITERE GRÜNDE, DIE FÜR VARIOBASE® SPRECHEN

Minimale Bauhöhe für maximale Flexibilität bei der Gestaltung
Variobase® hat eine der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Bauhöhen, die Ihnen eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Implantatversorgungen ermöglicht – auch bei begrenztem Platzangebot.



Zeit sparen durch Wegfall des Abstrahlens

Dank des speziell entwickelten Rastmechanismus zur Positionssicherung bei der Variobase® für Krone und des Spiralgewindes der Variobase® für Brücke/ Steg können Sie auch ohne Abstrahlen die Kleboberfläche optimal nutzen. Somit verringert sich die Anzahl der Bearbeitungsschritte und Sie sparen wertvolle Zeit.

* Mit Variobase® können Sie bis zu 30° Divergenz zwischen zwei Implantaten ausgleichen; die Variobase® Kappen können zusammen mit den verschraubten Straumann® Sekundärteilen eingesetzt werden, um grössere Abweichungen auszugleichen.

Mehr als hohe Flexibilität.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Verfahren.

Verwenden Sie Straumann® Variobase® in Ihrem gewünschten laborinternen Arbeitsablauf, um effizient hochwertige prothetische Versorgung zu erstellen.

WÄHLEN SIE IHREN BEVORZUGTEN LABORINTERNEN ARBEITSABLAUF

Press- oder Gussverfahren – Einfaches und exaktes Wax-up dank ausbrennbarer Kappen.



[New]

Variobase® für Brücke/Steg – Einfach die ausbrennbare Kappe auf der Variobase® platzieren und im Uhrzeigersinn drehen, um rotatorische oder vertikale Beweglichkeit zu vermeiden.

Digital gefertigte Restaurationen – Wählen Sie aus einer Vielzahl von Möglichkeiten aus, ganz gleich, ob Sie ein CARES® System besitzen oder nicht.

Mit dem CARES® System (oder der CARES® Working Station) können Sie auf die gewünschten Variobase® Prothetikkomponenten zugreifen, um die prothetische Versorgung präzise zu gestalten. Die CARES® X-Stream™ Lösung spart Ihnen wertvolle Zeit, da die Prothetikkomponenten gleichzeitig modelliert werden und Sie in einer Lieferung erreichen.

Mithilfe einer gängigen CAD/CAM-Software (z. B. Dental Wings**, 3M™ Lava™**, 3Shape** oder exocad**) können Sie mit der kontinuierlich weiterentwickelten CARES® App oder dem CARES® Plug-in auf die Variobase® STL-Daten zugreifen, so dass eine Gestaltung prothetischer Versorgung mit präziser Geometrie gewährleistet ist.

Auch wenn Sie ohne CAD/CAM-System arbeiten, können Sie mit unseren Variobase® Prothetikkomponenten profitieren: Unser CARES® Scan & Shape Service*** ist Ihr einfacher Zugang zu unserem CAD/CAM-gestützten Angebot mit einem On-Demand-Service für die Gestaltung.



* Variobase® und passende Krone, Brücke oder Deckprothese

** Wenden Sie sich an den Vertriebsmitarbeiter Ihres Landes, um Informationen zur Verfügbarkeit oder Eignung der Software-Versionen zu erhalten.

*** CARES® Scan & Shape ist in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar Einzelheiten erfahren Sie beim Vertriebsmitarbeiter Ihres Landes.

Mehr als eine Original-Verbindung. Berechtigtes Vertrauen.

Sie können sich bei der Gestaltung auf eine perfekte Harmonie zwischen Straumann Implantaten und den entsprechenden Prothetikkomponenten verlassen.



MIT DEN ORIGINAL-VERBINDUNGEN VON STRAUMANN® PROFITIEREN SIE VON

- perfekt passenden Komponenten
- Zuverlässigkeit, die durch klinische Langzeitdaten erwiesen ist
- hervorragendem Service und Support
- der Straumann® Garantie von 10 Jahren

Da nur Straumann die exakten Abmessungen und Toleranzen der Implantate kennt, können wir Ihnen eine perfekte und sichere Passform der Straumann-Implantate mit den entsprechenden Prothetikkomponenten gewährleisten. Eine hohe Präzision bei der Fertigung und ausserordentlich gründliche Prüfprozesse gewährleisten eine gleichbleibende Qualität aller Straumann® Originalkomponenten.

- 1 Straumann® Variobase® mit Kappe auf Straumann® WN 4.8 Implantat
- 2 Straumann® Variobase® mit Kappe auf Straumann® RC 4.1 Implantat





ALLE BROSCHÜREN AUCH
ONLINE VERFÜGBAR
www.straumann.de/mediathek

WIR SIND FÜR SIE DA

TEL.: 0761 / 4501 333

FAX: 0761 / 4501 400

E-Mail: order.de@straumann.com

eShop: www.straumann.de/eshop

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

National Distributor

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9
79111 Freiburg
Tel.: 0761/4501 0
Fax: 0761/4501 149
www.straumann.de

Dental Wings ist eine eingetragene Marke von Dental Wings inc., Kanada. 3M™, ESPE™ und Lava™ sind Marken der 3M Company oder 3M Deutschland GmbH. Unter Lizenz verwendet in Kanada. 3Shape Dental System ist eine eingetragene Marke von 3Shape A/S, Dänemark. Exocad ist eine eingetragene Marke der exocad GmbH, Deutschland. CEREC ist eine eingetragene Marke von Sirona Dental Systems GmbH, Deutschland.

© Institut Straumann AG, 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere Marken und Logos von Straumann®, die hier erwähnt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.